


VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT LES CONSIGNES AVANT DE COMMENCER.

R H I N O M E D

Utilisez ces consignes en conjonction avec celles du kit de test de détection des antigènes ou du test PCR.

RHINOSWAB JUNIOR CONSIGNES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

À UTILISER SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

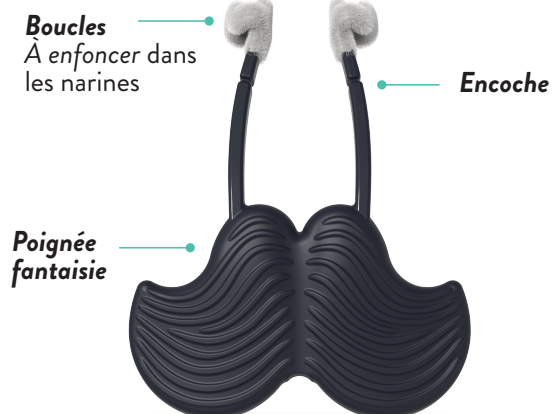


R H I N O S W A B
JUNIOR
by RHINOMED®

1 : LAVEZ-VOUS LES MAINS OU DÉSINFECTEZ-LES.




2 : EN NE TOUCHANT QUE LA POIGNÉE, sortez l'écouvillon de son emballage.

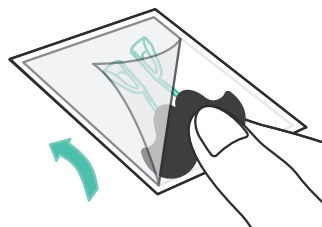


Ne pas utiliser si le film d'emballage est endommagé


3 : DEMANDEZ À L'ENFANT de tenir l'écouvillon par la poignée et de l'approcher de son nez.

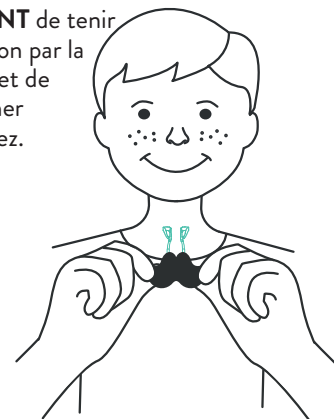

4 : L'ENFANT DOIT ENFONCER L'ÉCOUVILLON en douceur dans son nez, le plus loin possible sans que cela soit inconfortable.

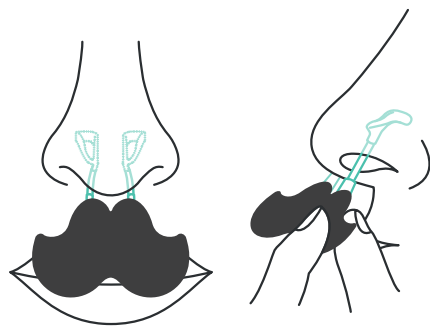

5 : RÉGLEZ LA MINUTERIE SUR 30 SECONDES et demandez à l'enfant de respirer normalement par le nez.

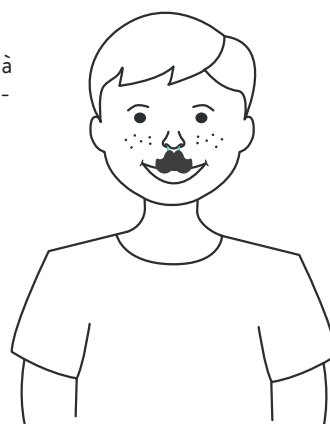


Réglez la minuterie sur 30 SECONDES

SUITE AU VERSO


7 : AU BOUT DE 15 SECONDES, demandez à l'enfant de déplacer l'écouvillon dans son nez pendant **15 secondes** en veillant à ce que les boucles soient toujours en contact avec la paroi nasale.

Déplacez l'écouvillon à l'intérieur du nez
15 secondes

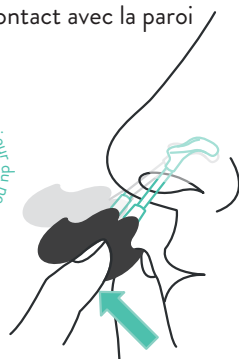


Sortez l'écouvillon du nez.

8 : CASSEZ LES DEUX BOUCLES DANS LE TUBE, L'UNE APRÈS L'AUTRE. Insérez les boucles dans le tube l'une après l'autre et cassez la tige au niveau de l'encoche.

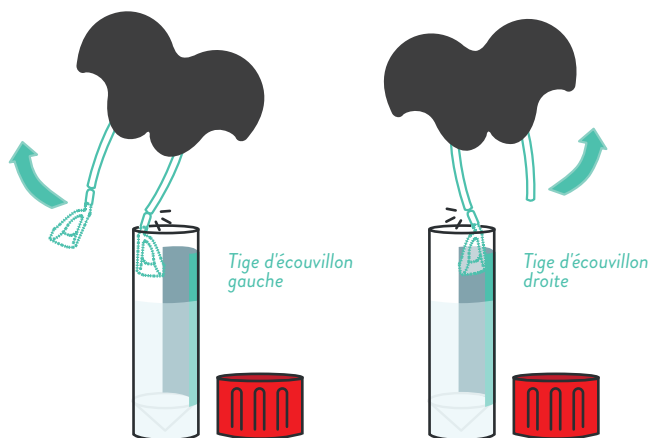

Pliez la tige de l'écouvillon contre le bord du tube au niveau de l'encoche.

9 : VISSEZ LE CAPUCHON FERMEMENT SUR LE TUBE pour éviter les fuites de liquide.

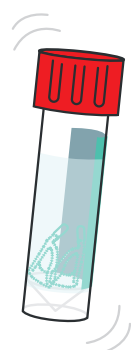

SECOUÉZ LE TUBE PLUSIEURS FOIS EN DOUCEUR

10 : LAVEZ-VOUS LES MAINS OU DÉSINFECTEZ-LES.



11 : TRAITEMENT DU TEST.

Veillez respecter les consignes pour renvoyer l'échantillon au centre de test concerné.

Ou consultez les consignes du kit de détection des antigènes.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	RHINOMED Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 En attente de brevet	Dispositif médical
	Organisme notifié
	Ne pas réutiliser
	Exposition à la lumière du soleil
	À utiliser avant

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	Lire les consignes avant l'utilisation
	Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé
	Identification unique des dispositifs
	Numéro de lot individuel
	Catalogue du fabricant/numéro de référence
	Représentant européen autorisé