


LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR.
Siga estas instrucciones junto con las instrucciones del kit de antígenos o prueba PCR.

RHINOMED

RHINOSWAB JUNIOR

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE MUESTRAS

DEBE USARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

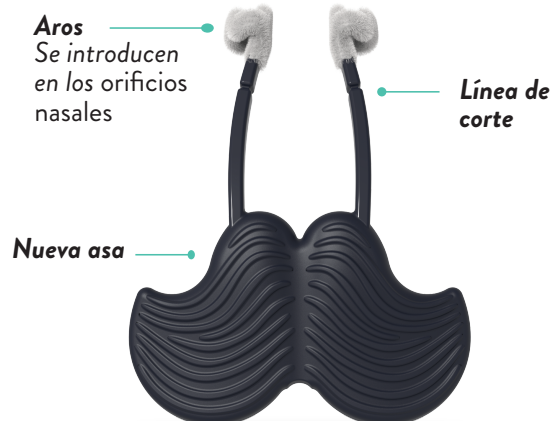


RHINOSWAB
JUNIOR
by RHINOMED®

1: LÁVESE LAS MANOS O HIGIENÍCELAS.



2: TOCANDO SOLO EL ASA, extraiga el hisopo de su envoltorio.

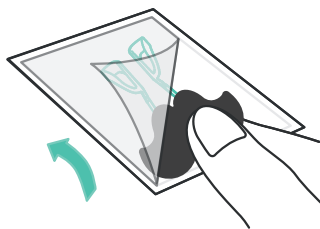


No usar si el envase está dañado

3: PIDA AL NIÑO


que sujete el hisopo por el asa y se lo introduzca en la nariz.



4: EL NIÑO DEBERÁ INTRODUCIRSE EL HISOPO suavemente en la nariz tanto como pueda sin que resulte molesto.

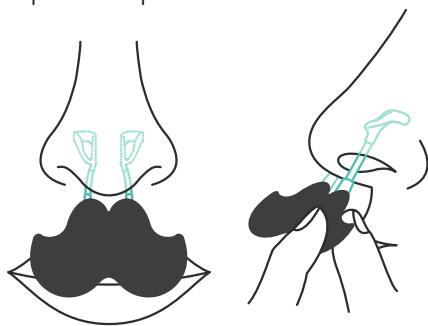

5: AJUSTE EL CRONÓMETRO EN 30 SEGUNDOS y pídale al niño que respire normalmente por la nariz.

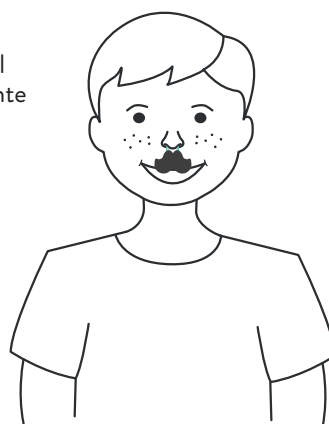

Cronometre 30 segundos


7: DESPUÉS DE 15 SEGUNDOS, pídale al niño que mueva el hisopo dentro de la nariz durante **15 segundos** asegurándose de que los aros toquen siempre el interior de la nariz.

Mover el hisopo dentro de la nariz
15 segundos



Extraer de la nariz.


8: INTRODUZCA LOS AROS EN EL TUBO DE UNO EN UNO. Introduzca los aros de uno en uno en el tubo y pártalos por la línea de corte.

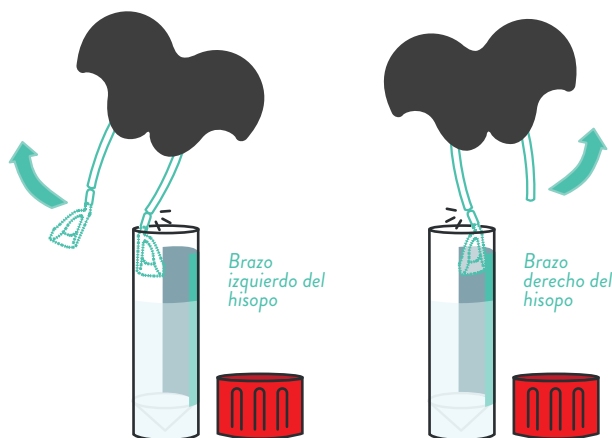

Para ello, doble el brazo del hisopo contra el borde del tubo por la línea de corte.

9: ROSQUE EL TAPÓN DEL TUBO CON FIRMEZA

asegurándose de que quede bien cerrado y no gotee.

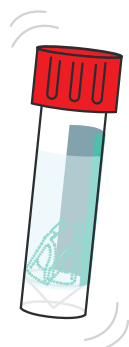

AGITAR SUAVEMENTE EL TUBO VARIAS VECES

10: LÁVESE LAS MANOS O HIGIENÍCELAS.



11: PROCESA LA PRUEBA.

Siga las instrucciones para enviar la muestra al centro de pruebas correspondiente.

O bien, siga las instrucciones del kit de antígenos.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	RHINOMED Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 Pendiente de patente	Dispositivo médico
	Organismo notificado
	No reutilizar
	Exposición a la luz solar
	Usar antes de

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Consulte las instrucciones de uso
	No usar si el envoltorio está dañado
	Identificador de dispositivo único
	Número de lote individual
	Número de catálogo/referencia del fabricante
	Representante autorizado en Europa