


VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT LES CONSIGNES AVANT DE COMMENCER.

R H I N O M E D

Utilisez ces consignes en conjonction avec celles du kit de test de détection des antigènes ou du test PCR.

# RHINOSWAB CONSIGNES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

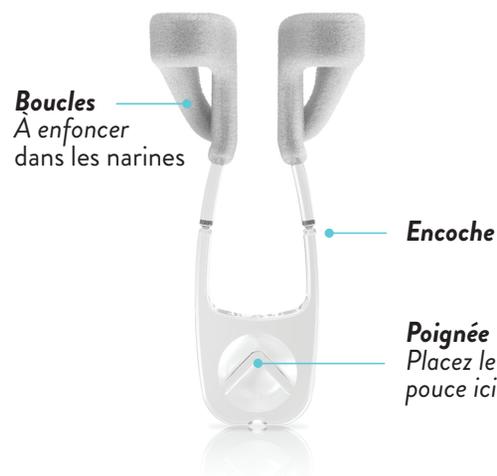


R H I N O S W A B  
by R H I N O M E D®

## 1 : LAVEZ-VOUS LES MAINS.




## 2 : EN NE TOUCHANT QUE LA POIGNÉE, sortez l'écouvillon de son emballage.

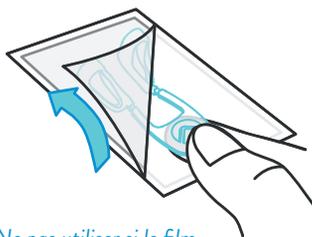


*Ne pas utiliser si le film d'emballage est endommagé*

## 3 : TENEZ L'ÉCOUVILLON par la poignée entre votre index et votre pouce.

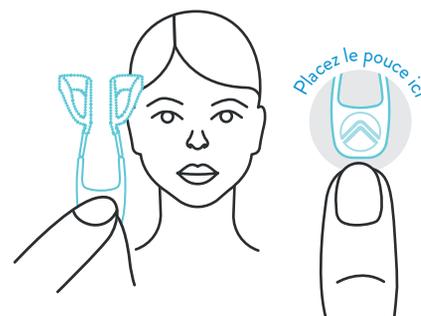

## 4 : POSITIONNEZ L'ÉCOUVILLON SOUS VOTRE NEZ.

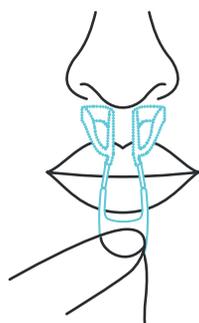

## 5 : INSÉREZ L'ÉCOUVILLON DANS VOTRE NEZ en positionnant d'abord les boucles puis en les enfonçant en douceur le plus loin possible sans que cela soit inconfortable (environ 2 à 3 cm). Poussez la poignée de l'écouvillon vers le haut au moment de l'insertion.

*La poignée reste à l'extérieur de votre nez*



## 6 : RÉGLEZ LA MINUTERIE SUR 30 SECONDES


et respirez normalement par le nez.



*Réglez la minuterie sur 30 SECONDES*


SUITE AU VERSO

**7 : AU BOUT DE 15 SECONDES**, déplacez l'écouvillon dans le nez pendant **15 secondes** avec une pression modérée et un contact permanent des boucles avec la paroi nasale.

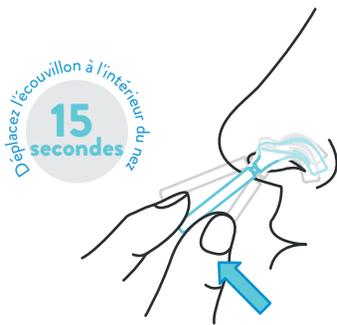

Sortez l'écouvillon du nez.

**8 : CASSEZ LES DEUX BOUCLES DANS LE TUBE, L'UNE APRÈS L'AUTRE.** Insérez les boucles dans le tube l'une après l'autre et cassez la tige au niveau de l'encoche.

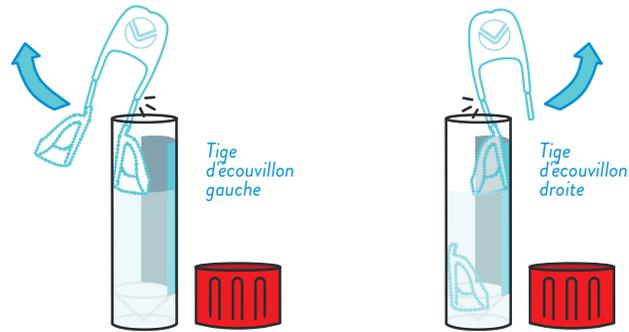

Pliez la tige de l'écouvillon contre le bord du tube au niveau de l'encoche.

**9 : VISSEZ LE CAPUCHON FERMEMENT SUR LE TUBE** pour éviter les fuites de liquide.



**10 : LAVEZ-VOUS LES MAINS.**



**11 : TRAITEMENT DU TEST.**

Veillez respecter les consignes pour renvoyer l'échantillon au centre de test concerné.

Ou consultez les consignes du kit de détection des antigènes.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	<b>RHINOMED</b> Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 En attente de brevet	Dispositif médical
	Organisme notifié
	Ne pas réutiliser
	Exposition à la lumière du soleil
	À utiliser avant

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	Lire les consignes avant l'utilisation
	Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé
	Identification unique des dispositifs
	Numéro de lot individuel
	Catalogue du fabricant/numéro de référence
	Représentant européen autorisé