

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR.**  
Utilize estas instruções em conjunto com as instruções do kit de teste de antígeno ou teste PCR.

**R H I N O M E D**

# RHINOSWAB

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA RECOLHA DE AMOSTRAS



**R H I N O S W A B**  
by R H I N O M E D®

### 1: LAVE AS MÃOS.




### 2: TOCANDO APENAS NA PEGA, remova a zaragatoa da respectiva embalagem.




*Não utilize se a bolsa estiver danificada*

### 3: SEGRE A ZARAGATOA pela pega entre o indicador e o polegar.

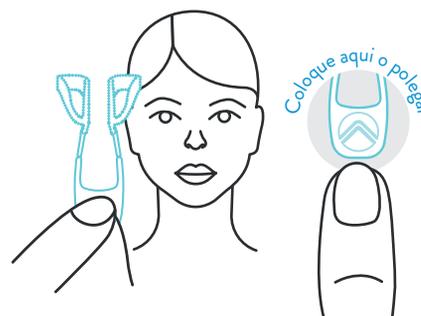

### 4: POSICIONE A ZARAGATOA ABAIXO DO NARIZ.

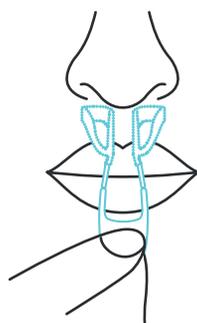

### 5: INTRODUZA A ZARAGATOA NO NARIZ

colocando primeiros os aros e, em seguida, empurrando a zaragatoa até onde for confortável (cerca de 2 a 3 cm ou 1 polegada). Incline a pega da zaragatoa para cima à medida que a insere.

*A pega ficará fora do nariz*



### 6: DEFINA O TEMPORIZADOR PARA 30 SEGUNDOS e respire normalmente através do nariz.



*Defina o temporizador para 30 SEG*


**VIRE POR FAVOR**

**7: APÓS 15 SEGUNDOS**, mova a zaragatoa dentro do nariz durante **15 segundos** com uma pressão moderada, assegurando-se de que os aros estão em contacto contínuo com o interior do nariz.




Retire do nariz.

**8: PARTA OS DOIS AROS NO TUBO, UM DE CADA VEZ.** Introduza um aro de cada vez no tubo e parta pela linha de corte.

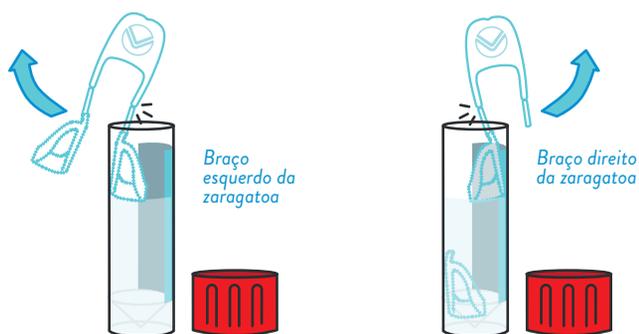

Faça-o dobrando o braço da zaragatoa contra a beira do tubo pela linha de corte.

**9: APERTE BEM A TAMPA NO TUBO** garantindo que está bem selada para que o líquido não verta.

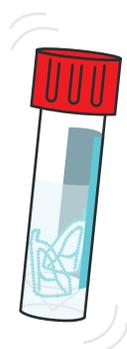

**AGITE O TUBO SUAVEMENTE ALGUMAS VEZES**

**10: LAVE AS MÃOS.**



**11: REALIZE O PROCESSAMENTO DO TESTE.**

Siga as instruções para devolver a amostra ao centro de testagem relevante.

Ou consulte as instruções no kit de teste de antigénio.

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	<b>RHINOMED</b> Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 Patente Pendente	Dispositivo médico
	Organismo notificado
	Não reutilizar
	Exposição à luz solar
	Prazo de validade

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Consulte as instruções de utilização
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Identificador único do dispositivo
	Número de lote individual
	Número de catálogo/referência do fabricante
	Representante europeu autorizado